

# Tendon adducteur sensible

Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



# Avec Your® Liner

Membre



Modèle 3D



Your® Liner



## Indication

Le patient se plaint de la compression appliquée par le manchon sur son tendon adducteur médial.



## Fonctions clés



Sur-mesure - depuis scan 3D




Compressions adaptées

## Problèmes typiques

### Manchon standard exerce une pression excessive sur l'adducteur

Les manchons fémoraux standards sont soit cylindriques soit coniques. Comme ils sont conçus pour s'adapter à des membres de différentes longueurs, ils ne comportent pas de rayon au niveau du tendon adducteur, et exercent donc une pression supplémentaire dans cette région, ce qui peut entraîner une gêne ou des irritations cutanées.

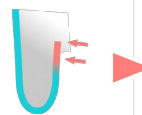

### Rayon au niveau de l'adducteur pour soulager la pression

Chaque Your® Liner étant conçu pour un patient individuel, un rayon peut être inclus dans le modèle 3D afin de s'assurer que la pression appliquée sur le tendon d'adducteur est soulagée, réduisant ainsi le risque que le liner génère une gêne ou des irritations cutanées dans cette zone.

La différence Your® Liner

