

Membre court

Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



Avec Your® Liner

Membre



Modèle 3D



Your® Liner



Indication

Le membre résiduel court.
Le poids du patient est donc supporté sur une surface limitée, ce qui entraîne une pression intra-embroiture plus élevée.



Fonctions clés



Sur-mesure - depuis scan 3D




Suspension configurable

Problèmes typiques

Problèmes de suspension

Les membres courts font souvent face à des problèmes de suspension :

- L'attache distale peut amener du pistonage, et les membres courts peuvent y être particulièrement sensibles.
- La suspension à dépressurisation est souvent impossible.

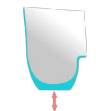

Proprioception limitée

Le membre résiduel ne fournit qu'un court levier pour contrôler la prothèse, ce qui peut limiter la proprioception.



Systèmes de suspension combinés



Your® Liner offre la possibilité de combiner une attache distale et des anneaux silicone pour une meilleure suspension dans l'embroiture. La combinaison de ces systèmes peut améliorer la suspension globale, ce qui peut faire la différence dans les cas où la suspension est délicate, comme dans le cas de membres résiduels courts.



Coussin distal plus épais pour un levier allongé

En ajoutant plus d'épaisseur à l'extrémité distale, on peut allonger le membre résiduel, ce qui peut permettre d'obtenir un levier plus long pour mieux contrôler la prothèse.

La différence Your® Liner

